


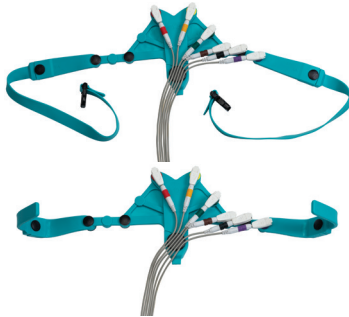
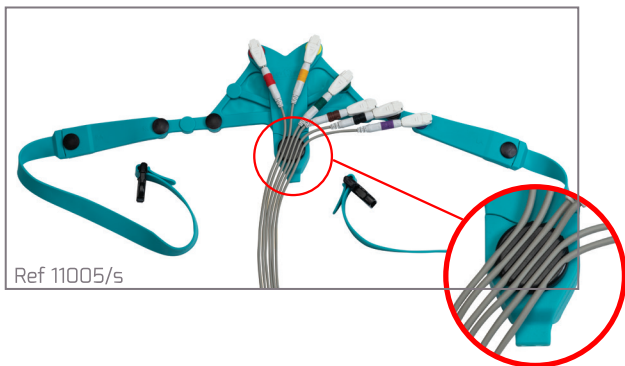


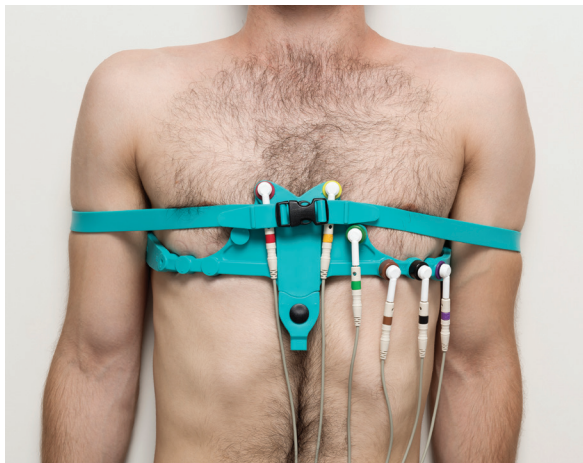

LevMed **AllBrand™** ECG Electrode Belt
Ceinture d'électrodes ECG **AllBrand™** LevMed
Cinturón de Electrodo ECG LevMed **AllBrand™**
Cintura con elettrodi ECG **AllBrand™** di LevMed
EKG-Elektrodengürtel LevMed **AllBrand™**
LevMed **AllBrand™** ECG-elektroderiem
LevMed **AllBrand™** ECG Elektróda Öv
LevMed **AllBrand™** EKG Elektrot Kemer
Ζώνη Ηλεκτροδίων ΗΚΓ LevMed **AllBrand™**
LevMed **AllBrand™** حزام إلكترود تخطيط القلب

O Produto: Cinta Elétrodo ECG, da Empresa, LevMed **AllBrand™**
LevMed **AllBrand™** EKG elektrodoový pás

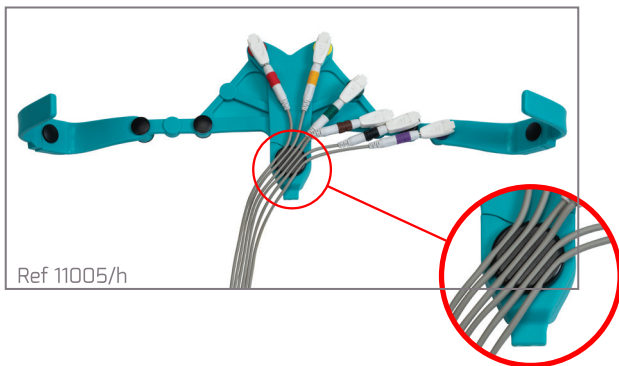

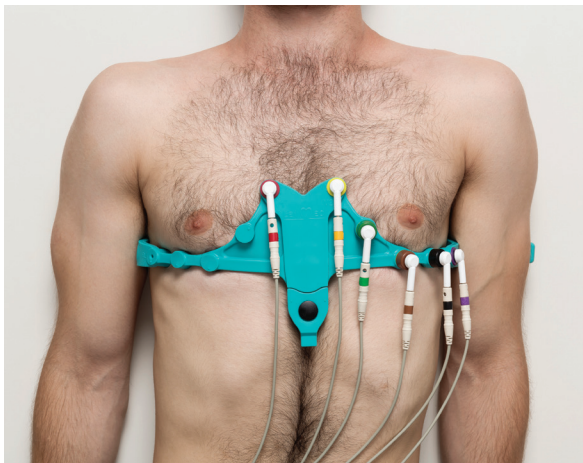



INSTRUCTIONS FOR USE

LevMed AllBrand™ ECG Electrode Belt



with Handles (Cat# 11005/h)



with Straps (Cat# 11005/s)



Rx Only

Caution: Read the complete list of instructions before using the product

Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician

INTENDED USE: LevMed Allbrand™ ECG Electrode Belt is a reusable accessory intended to be used with ECG devices for short-term 12-lead rest ECG recordings for adults and pediatrics.

WARNINGS AND CAUTIONS

- Do not use this device for any purpose other than the stated intended use.
- Remove device before performing defibrillation.
- LevMed ECG Belt is intended to be used for rest ECG recordings, make sure the patient is relaxed, lying still, on a flat surface.
- Stay away from devices that create strong electromagnetic fields.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use LevMed ECG belt on irritated or damaged skin.

SYMBOL LEGENDS



Caution, refer to instructions for use

SN

Serial number

REF

Catalogue number



Manufacturer

LOT



Date of manufacture



Non Sterile



WEEE- Waste of electrical and electronic equipment





LevMed AllBrand™ ECG Electrode Belt

INSTRUCTIONS FOR USE

1. DEVICE DESCRIPTION

LevMed AllBrand™ ECG Belt is a system of ECG electrodes cast in a hyper-flexible silicone that is similar to ECG V1-V6 pre-cordial electrodes. The Belt is flexible and can be stretched to fit all body shapes and sizes, men and women alike; when fitted to the chest, it stretches to the required proportions, and the distance between the electrodes is automatically set. The Belt can be connected to any standard ECG patient cable.

2. APPLICATION INSTRUCTIONS

Scan the applicable QR code for the Application process of the AllBrand™ ECG Belt:



For AllBrand with Handles (Cat# 11005/h) For AllBrand with Straps (Cat# 11005/s)

3. CLEANING & DISINFECTION

Wipe the LevMed ECG Belt with disinfectant wipe after each patient. Use only disinfectants that are dedicated for use on medical devices.

Caution: Do not use disinfectants containing petrol.

WARRANTY

LevMed Ltd. warranty applies to the silicone components of the ECG Belt for a period of 12 months from the date of purchase or 15 months from the date of production, whichever is shorter. Cables, internal wires, electrodes, plastic parts, and other parts integrated within the ECG Belt are covered by warranty for a period of 3 months from the date of purchase or 6 months from the date of production, whichever is shorter. Warranty does not apply to any accessories supplied.


This warranty does not include or cover malfunctions caused by unreasonable use, noncompliance with user and maintenance instructions, or damage caused by unauthorized or unqualified repairs.

ATTENTION! Do not use if the electrodes are not in full contact with the body.



MODE D'EMPLOI

Ceinture d'électrodes ECG AllBrand™ LevMed

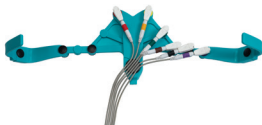

avec anses (N° de réf. 11005/h)



avec brides (N° de réf. 11005/s)



Rx Only

Attention: Lire l'intégralité des instructions avant d'utiliser le produit.

Attention: Les lois fédérales américaines limitent la vente de ce dispositif par ou sur la prescription d'un médecin.

INDICATIONS D'UTILISATION: La ceinture d'électrodes ECG Allbrand™ LevMed est un accessoire réutilisable, conçu pour être utilisé avec des ECG (électrocardiographes) pour l'enregistrement d'un ECG de repos à 12 dérivations de courte durée, en médecine générale et pédiatrique.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- N'utilisez pas ce dispositif à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Retirez le dispositif avant de procéder à une défibrillation.
- La ceinture d'électrodes ECG LevMed est conçue pour être utilisée au cours de l'enregistrement d'un ECG de repos ; veillez à ce que le patient soit allongé, détendu et immobile, sur une surface plane.
- Tenez-vous à l'écart de tout appareil pouvant générer de forts champs électromagnétiques.

CONTRE-INDICATIONS

- N'utilisez pas la ceinture d'électrodes ECG LevMed sur une peau irritée ou endommagée.

LÉGENDES DES SYMBOLES



Caution, refer to instructions for use

SN

Serial number

REF

Catalogue number



Manufacturer

LOT



Date of manufacture



Non Sterile



WEEE - Waste of electrical and electronic equipment



Ceinture d'électrodes ECG AllBrand™ LevMed

MODE D'EMPLOI

1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

La ceinture ECG AllBrand™ LevMed est un système incluant des électrodes ECG moulées dans de la silicone extra souple, semblables aux électrodes précordiales V1 à V6 actuelles. La ceinture est extensible et s'adapte à toutes les anatomies, féminines comme masculines; lorsqu'elle est placée sur la poitrine, elle s'étend aux proportions requises et la distance entre les électrodes s'ajuste automatiquement. La ceinture peut être connectée à tout câble patient ECG standard.

2. INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Scannez le code QR applicable au processus d'application de la ceinture ECG AllBrand™:



Pour AllBrand avec anses (N° de réf. 11005/h) Pour AllBrand avec brides (N° de réf. 11005/s)

3. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Essuyez la ceinture d'électrodes ECG LevMed à l'aide d'une lingette désinfectante après chaque patient. Utilisez uniquement des désinfectants dont l'usage est validé pour des dispositifs médicaux.

Attention: N'utilisez pas de désinfectant à base d'essence.

GARANTIE

La garantie de LevMed Ltd. s'applique aux composants en silicone de la ceinture d'électrodes ECG pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat ou de 15 mois à compter de la date de fabrication, selon la période la plus courte. Les câbles, fils internes, électrodes, pièces en plastique et autres pièces intégrées à la ceinture d'électrodes ECG sont couvert(e)s par la garantie pendant une période de 3 mois à compter de la date d'achat ou de 6 mois à compter de la date de fabrication, selon la période la plus courte. La garantie ne s'applique pas aux accessoires fournis. Cette garantie ne couvre pas les dysfonctionnements consécutifs à un usage abusif, au non-respect des instructions d'emploi et de maintenance, ou les dommages consécutifs à des réparations exécutées par du personnel non qualifié ou non agréé.

ATTENTION! Ne pas utiliser si les électrodes ne sont pas en contact complet avec le corps.



INSTRUCCIONES DE USO

Cinturón de Electrodo ECG LevMed AllBrand™



Produto com Alças (Categoria nº 11005/h) Produto com Alças (Categoria nº 11005/s)



Apenas Rx

Precaución: Lea la lista de instrucciones completa antes de usar el producto

Precaución: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de este.

USO PREVISTO: El cinturón de electrodos de ECG LevMed Allbrand™ es un accesorio reutilizable diseñado para usarse con dispositivos de ECG para registros de ECG de reposo de 12 derivaciones a corto plazo para adultos y pediatría.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No utilice este dispositivo para propósito alguno que no sea el uso previsto declarado.
- Retire el dispositivo antes de realizar la desfibrilación.
- El cinturón de ECG LevMed está diseñado para ser utilizado para registros de ECG en reposo, asegúrese de que el paciente esté relajado, acostado y quieto, sobre una superficie plana.
- Manténgase alejado de dispositivos que creen fuertes campos electromagnéticos.

CONTROINDICAZIONI

- No utilice el cinturón de ECG de LevMed sobre piel irritada o dañada.

EXPLICACIONES DE SÍMBOLOS



Precaución, consulte las instrucciones de uso



Número de serie



Número de catálogo



Fabricante



Fecha de fabricación



No estéril



RAEE- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Cinturón de Electrodo ECG LevMed AllBrand™

INSTRUCCIONES DE USO

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

El cinturón de ECG LevMed AllBrand™ es un sistema de electrodos de ECG moldeados en una silicona hiperflexible que es similar a los electrodos precordiales de ECG V1-V6. El Cinturón es flexible y se puede estirar para adaptarse a todas las formas y tamaños del cuerpo, tanto para hombres como para mujeres. Cuando se ajusta al pecho, se estira a las proporciones requeridas y la distancia entre los electrodos se establece automáticamente. El Cinturón se puede conectar a cualquier cable de paciente de ECG estándar.

2. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Escanee el código QR aplicable para el proceso de aplicación del cinturón de ECG AllBrand™:



Para AllBrand con Manijas (N.º de catálogo 11005/h) Para AllBrand con Correas (N.º de catálogo 11005/s)

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie el cinturón de ECG de LevMed con una toallita desinfectante después de cada paciente. Utilice únicamente desinfectantes específicos para su uso en dispositivos médicos

Precaución: No utilice desinfectantes que contengan alcohol.

GARANTÍA

La garantía de LevMed Ltd. se aplica a los componentes de silicona del cinturón de ECG durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra o 15 meses a partir de la fecha de producción, lo que sea más corto. Los cables, alambres internos, electrodos, piezas de plástico y otras piezas integradas en el cinturón de ECG están cubiertos por la garantía durante un período de 3 meses a partir de la fecha de compra o 6 meses a partir de la fecha de producción, lo que sea más corto. La garantía no se aplica a ningún accesorio suministrado.

Esta garantía no incluye ni cubre fallas de funcionamiento causadas por un uso irrazonable, incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento o del usuario, o daños causados por reparaciones no autorizadas o no calificadas.

ATENCIÓN! No lo use si los electrodos no están en contacto completo con el cuerpo.



ISTRUZIONI PER L'USO

Cintura con elettrodi ECG AllBrand™ di LevMed



Con manici (N. di catalogo 11005/h) Con flange (N. di catalogo 11005/s)



Solo Rx

Attenzione: Leggere tutto l'elenco delle istruzioni prima di usare il prodotto

Attenzione: La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo da parte o per ordine di un medico.

Destinazione d'uso: La cintura con elettrodi ECG AllBrand™ di LevMed è un accessorio riutilizzabile destinato all'uso con dispositivi per ECG per registrazioni ECG a riposo a 12 derivazioni di breve durata per pazienti adulti e pediatrici.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Non usare questo dispositivo per nessuno scopo diverso dalla destinazione d'uso indicata.
- Rimuovere il dispositivo prima di eseguire defibrillazione.
- La cintura ECG di LevMed è destinata ad essere usata per registrazioni di ECG a riposo, accertarsi che il paziente sia rilassato, disteso immobile, su una superficie piana.
- Tenersi lontani da dispositivi che creano forti campi elettromagnetici.

CONTROINDICAZIONI

- Non usare la cintura ECG di LevMed su pelle irritata o danneggiata.

LÉGENDES DES SYMBOLES



Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso

SN

Numero di serie

REF

Numero di catalogo



Produttore

LOT



Data di fabbricazione



Non sterile



RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Cintura con elettrodi ECG AllBrand™ di LevMed

ISTRUZIONI PER L'USO

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

La cintura ECG AllBrand™ di LevMed è un sistema di elettrodi per ECG forgiato su silicone ultra flessibile simile a elettrodi precordiali V1-V6 per ECG. La cintura è flessibile e può essere tirata in modo da adattarsi a tutte le forme e le dimensioni del corpo, sia a uomini che a donne: quando adattata al petto, si estende alle proporzioni necessarie, e la distanza fra gli elettrodi si regola automaticamente. La cintura può essere connessa a qualsiasi cavo per ECG standard per il paziente.

2. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Scansionare il codice QR rilevante per il processo di applicazione della cintura ECG AllBrand™.



Per AllBrand con manici (N. di catalogo 11005/h) Per AllBrand con flange (N. di catalogo 11005/s)11005/s)

3. PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire la cintura ECG di LevMed con una salvietta disinfettante dopo ogni paziente. Usare solo disinfettanti che sono destinati a uso su dispositivi medici.

Attenzione: Non usare disinfettanti che contengono alcol.

GARANZIA

La garanzia di LevMed Ltd. si applica ai componenti di silicone della cintura ECG per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto o di 15 mesi dalla data di produzione, il periodo più corto dei due. Cavi, fili interni, elettrodi, parti di plastica e altre parti integrate nella cintura ECG sono coperte dalla garanzia per un periodo di 3 mesi dalla data di acquisto o 6 mesi dalla data di produzione, il periodo più corto dei due. La garanzia non è applicata agli accessori forniti.

Questa garanzia non include o copre malfunzionamenti causati da un uso non ragionevole, mancato rispetto delle istruzioni per l'utente e di manutenzione, o un danno causato da riparazioni non autorizzate o non qualificate.

ATTENZIONE! Non utilizzare se gli elettrodi non sono completamente a contatto con il corpo.



GEBRAUCHSANWEISUNG

EKG-Elektrodengürtel LevMed AllBrand™



mit Griffen (Kat.-Nr. 11005/h)



mit Bänder (Kat.-Nr. 11005/s)



Vorsicht: Lesen Sie die vollständige Liste der Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

Vorsicht: Das Bundesrecht der USA beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf durch einen Arzt oder auf dessen Anordnung.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG: Der EKG-Elektrodengürtel LevMed Allbrand™ ist ein wiederverwendbares Zubehör so konzipiert, dass es zusammen mit den EKG-Geräten für kurzzeitige 12-Kanal-Ruhe-EKG-Messungen bei Erwachsenen und in Kinderheilkunde verwendet werden kann.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für einen anderen als den angegebenen Verwendungszweck.
- Entfernen Sie das Gerät vor der Defibrillation.
- Der EKG-Gürtel LevMed ist für Ruhe-EKG-Messungen vorgesehen, daher vergewissern Sie, dass der Patient entspannt ist und regungslos auf einer ebenen Fläche liegt.
- Halten Sie es fern von den Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen.

GEGENANZEIGEN

- Verwenden Sie den EKG-Gürtel LevMed nicht auf gereizter oder geschädigter Haut.

LEGENDEN DER SYMBOLE

Vorsicht, s.die Gebrauchsanweisung

Seriennummer

Katalog-Nummer

Hersteller

LOT

Herstellungsdatum

Unsteril

EEAG - Abfälle aus elektrischen und Elektronischen Geräten

LATEX

CE

EKG-Elektrodegürtel LevMed AllBrand™

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. GERÄTEBESCHREIBUNG

Der EKG-Gürtel LevMed AllBrand™ ist ein in Silikon vergossenes System von EKG-Elektroden, die den präkordialen EKG-Elektroden V1-V6 ähnlich sind. Der Gürtel ist flexibel und kann so gedehnt werden, dass es sich allen Körperformen und -größen anpasst, Männern und Frauen gleichermaßen; beim Anbringen an den Brustbereich wird er auf die gewünschten Proportionen gedehnt, und der Abstand zwischen den Elektroden wird automatisch eingestellt. Der Gürtel kann an jedes handelsübliche EKG-Patientenkabel angeschlossen werden.

2. GEBRAUCHSANWEISUNG

Scannen Sie den entsprechenden QR-Code für das Anwendungsverfahren des EKG-Gürtels AllBrand™:



Für AllBrand mit Griffen (Kat.-Nr. 11005/h)

Für AllBrand mit Bänder (Kat.-Nr. 11005/s)

3. REINIGUNG UND DESINFEKTION

Nach jedem Patienten, den LevMed EKG-Gürtel mit einem Desinfektionswischtuch abwischen. Nur solche Desinfektionsmittel verwenden, die für Medizinprodukte vorgesehen sind.

Vorsicht: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Desinfektionsmittel.

GEWÄHRLEISTUNG

Gewährleistung von LevMed Ltd. gilt für die Silikonkomponenten des EKG-Gürtels für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum oder 15 Monaten ab dem Produktionsdatum, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. Für die in den EKG-Gürtel eingebauten Kabel, Innenleiter, Elektroden, Kunststoffteile und für die anderen Teile gilt eine Garantie von 3 Monaten ab Kaufdatum oder von 6 Monaten ab

Vorsicht, s. die Gebrauchsanweisung Seriennummer

Herstellungsdatum Unsteril

Produktionsdatum, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. Die Garantie gilt nicht für evtl. geliefertes Zubehör.

Diese Garantie umfasst oder deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch unvernünftigen Gebrauch, Nichteinhaltung von Benutzer- und Wartungsanweisungen oder Schäden durch nicht autorisierte oder nicht qualifizierte Reparaturen verursacht werden.

AUFMERKSAMKEIT! Nicht verwenden, wenn die Elektroden nicht in vollem Kontakt mit dem Körper stehen.



GEBRUIKSAANWIJZING LevMed AllBrand™ ECG-elektroderiem



met handgrepen (Cat# 11005/h)



met banden (Cat# 11005/s)



Alleen Rx

Opgelet: Lees de volledige lijst met instructies voorafgaand aan het gebruik van het product.

Opgelet: Federale wetgeving (VS) beperkt dit apparaat tot verkoop door of op voorschrift van een arts.

BEOOGD GEBRUIK: LevMed AllBrand™ ECG-elektroderiem is een herbruikbaar accessoire, bedoeld om te worden gebruikt met ECG-apparaten voor ECG-opnamen bij rust op korte termijn met 12 kabels voor volwassenen en kindergeneeskunde.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik dit apparaat voor geen ander doel dan het vermelde beoogde gebruik.
- Verwijder het apparaat voorafgaand aan uitvoeren van defibrillatie.
- LevMed ECG-riem is bedoeld om te worden gebruikt voor ECG-opnamen; zorg ervoor dat de patiënt ontspannen is en stil ligt op een vlakke ondergrond.
- Blijf weg van apparaten die sterke elektromagnetische velden creëren.

CONTRA-INDICATIES

- Gebruik de LevMed ECG-riem niet op geïrriteerde of beschadigde huid.

LEGENDA VAN SYMBOLEN



Opgelet, raadpleeg de gebruiksaanwijzing

SN

Serienummer

REF

Catalogusnummer



Fabrikant

LOT



Productiedatum



Niet steriel



WEEE - Afval van elektrische en elektronische apparatuur



LevMed AllBrand™ ECG-elektroderiem

GEBRUIKSAANWIJZING

1. OMSCHRIJVING APPARAAT

LevMed AllBrand™ ECG-riem is een systeem van ECG-elektrodes gegoten in hyperflexibel silicone dat vergelijkbaar is met ECG V1-V6 precordiale elektrodes. De riem is flexibel en kan worden uitgerekt zodat het past bij alle lichaamsvormen en -groottes, mannen en vrouwen. Wanneer het wordt aangebracht op de borst, rekt het uit naar de vereiste maten, en de afstand tussen de elektrodes wordt automatisch ingesteld. De riem kan worden aangesloten op elke standaard ECG-patiëntenkabel.

2. INSTRUCTIES VOOR TOEPASSING

Scan de toepasselijke QR-code voor het toepassingsproces van de AllBrand™ ECG-riem:



Voor AllBrand met handgrepen (Cat# 11005/h)

Voor AllBrand met banden (Cat# 11005/s)

3. REINIGING EN ONTSMETTING

Veeg de LevMed ECG-riem af met een ontsmettingsdoekje na elke patiënt. Gebruik alleen ontsmettingsmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik op medische apparaten.

Opgelet: Gebruik geen ontsmettingsmiddelen die alcohol bevatten.

GARANTIE

La garanzia di LevMed Ltd. si applica ai componenti di silicone della cintura ECG per un periodo di 12. De garantie van LevMed Ltd. is van toepassing op de silicone componenten van de ECG-riem voor een periode van, de kortste van, 12 maanden na de aanschafdatum of 15 maanden na de productiedatum. Kabels, interne draden, elektroden, plastic onderdelen en andere onderdelen geïntegreerd in de ECG-riem worden gedekt door de garantie voor een periode van, de kortste van, 3 maanden na de aanschafdatum of 6 maanden na de productiedatum. De garantie is niet van toepassing op enige geleverde accessoires.

Deze garantie omvat of dekt geen defecten veroorzaakt door onredelijk gebruik, niet-naleving van gebruiks- en onderhoudsinstructies, of schade veroorzaakt door onbevoegde of niet-gequalificeerde reparaties.

AANDACHT! Niet gebruiken als de elektroden niet volledig in contact zijn met het lichaam.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS LevMed AllBrand™ ECG Elektróda Öv



Fogantyúkkal (Cat# 1100/h)



Pántokkal (Cat# 11005/s)



Alleen Rx

Figyelem: A termék használata előtt olvassa el a használati utasítások teljes listáját!

Figyelem: Szövetségi törvény (USA) korlátozza ezen eszköz orvos által vagy orvosi utasításra való értékesítését.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: A LevMed Allbrand™ EKG-elektrodaöv egy újrafelhasználható tartozék, amelyet az EKG-készülékkel való rövid távú, 12 elvezetéses EKG-vizsgálatokhoz használnak felnőttek és gyermekek számára.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne használja ezt a készüléket a megadott rendeltetési céltól eltérő célra!
- Defibrilláció előtt távolítsa el a készüléket!
- A LevMed EKG-öv nyugalmi EKG-felvételek készítésére szolgál, győződjön meg róla, hogy a beteg nyugodt, és mozdulatlanul fekszik, sík felületen!
- Tartsa távol magát az erős elektromágneses mezőt létrehozó készülékektől!

ELLENJAVALLATOK

- Ne használja a LevMed EKG-övet irritált vagy sérült bőrön!

SZIMBÓLUMOK ÉS JELENTÉSÜK



Vigyázat, olvassa el a használati utasítást

SN

Sorozatszám

REF

Katalógusszám



Gyártó

LOT



Gyártás dátuma
Nem steril



WEEE – Elektronikai hulladék



LevMed AllBrand™ ECG Elektróda Öv

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. ESZKÖZLEÍRÁS

A LevMed AllBrand™ EKG-öv egy olyan EKG-elektrodákból álló rendszer, amely az EKG V1-V6 prekordiális elektrodákhoz hasonló, szuperflexibilis szilikonba öntött EKG-elektrodákból áll. Az öv rugalmas és nyújtható, hogy minden testalkathoz és testmérethez, férfiakhoz és nőkhoz egyaránt illeszkedjen; a mellkasra illesztve a kívánt arányokra nyúlik, és az elektrodák közötti távolság automatikusan beáll. Az öv bármely szabványos EKG-pácienskábelhez csatlakoztatható.

2. ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK

Az AllBrand™ EKG-öv alkalmazási folyamatáért szkennelje be az alkalmazandó QR-kódot:



AllBrand Fogantyúkkal (Cat# 11005/h)

AllBrand Pántokkal (Cat# 11005/s)

3. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Minden egyes beteg után törölje le a LevMed EKG-övet fertőtlenítő kendővel! Csak olyan fertőtlenítőszeret használjon, amelyek kifejezetten orvosi eszközökön való használatra készültek!

Figyelem: Ne használjon alkoholt tartalmazó fertőtlenítőszeret!

JÓTÁLLÁS

A LevMed Ltd. garanciája az EKG-öv szilikon összetevőire a vásárlástól számított 12 hónapig vagy a gyártástól számított 15 hónapig érvényes, attól függően, hogy melyik a rövidebb. A kábelekre, belső vezetékekre, elektrodákra, műanyag alkatrészekre, és az EKG-övbe beépített egyéb alkatrészekre a vásárlás időpontjától számított 3 hónapig vagy a gyártás időpontjától számított 6 hónapig terjedő jótállás vonatkozik.


Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan meghibásodásokra, amelyeket a következők okoznak: nem megfelelő használat, a felhasználó nem követi a használati utasításokat, jogosulatlan és hozzáértés nélküli javítás.

FIGYELEM! Ne használja, ha az elektrodák nem érintkeznek teljesen a testtel.



KULLANIM TALİMATI

LevMed AllBrand™ EKG Elektrot Kemerı

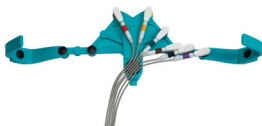

Kullu (Cat# 11005/h)



Askılı (Cat# 11005/s)



Rx Only

Dikkat: Ürünü kullanmadan önce talimat listesinin tamamını okuyunuz

Dikkat: ABD federal yasalarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya talebi üzerine satılabilir

INTENDED USE: LevMed Allbrand™ EKG Elektrot Kemerı, yetişkinler ve çocuklar için kısa süreli 12 derivasyonlu istirahat EKG kayıtları için EKG cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış tekrar kullanılabilir bir aksesuardır.

UYARILAR VE İKAZLAR

- Bu cihazı belirtilen kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
- Defibrilasyon yapmadan önce cihazı çıkarın.
- LevMed EKG Kemerı, istirahat EKG kayıtları için kullanılmak üzere tasarlanmıştır, hastanın düz bir yüzey üzerinde rahat ve hareketsiz yattığından emin olun.
- Güçlü elektromanyetik alanlar oluşturan cihazlardan uzak durun.

KONTRENDİKASYONLAR

- LevMed EKG kemerini tahriş olmuş veya hasar görmüş cilt üzerinde kullanmayın.

SEMBOL İŞARETLERİ



Dikkat, kullanım kılavuzuna başvurun



Seri numarası



Katalogusszám



Üretici



Üretim tarihi



Steril olmayan



AEEE- Atık elektrik ve elektronik ekipman



LevMed AllBrand™ EKG Elektrot Kemerı

KULLANIM TALİMATI

1. CİHAZ AÇIKLAMASI

LevMed AllBrand™ EKG Kemerı, EKG V1-V6 prekordiyal elektrotlarına benzeyen, hiper esnek bir silikon kalıptan dökülmüş bir EKG elektrot sistemidir. Kemer esnektir ve hem erkek, hem de kadında tüm vücut şekillerine ve boyutlarına uyacak şekilde gerilebilir; göğse takıldığında gerekli oranda esner ve elektrotlar arasındaki mesafe otomatik olarak ayarlanır. Kemer, herhangi bir standart EKG hasta kablosuna bağlanabilir.

2. UYGULAMA TALİMATLARI

AllBrand™ EKG Kemerinin Uygulama süreci için ilgili QR kodunu tarayın:



Kulplu AllBrand için (Cat# 11005/h)

Askılı AllBrand için (Cat# 11005/sn)

3. TEMİZLİK & DEZENFEKSİYON

LevMed EKG Kemerini her hastadan sonra dezenfektan mendille silin. Yalnızca tıbbi cihazlarda kullanıma özel dezenfektanları kullanın.

Dikkat: Alkol içeren dezenfektanlar kullanmayın.

GARANTİ

LevMed Ltd. garantisi, EKG Kemerinin silikon bileşenleri için satın alma tarihinden itibaren 12 ay veya üretim tarihinden itibaren 15 ay (hangisi daha kısa ise) için geçerlidir. Kablolar, dahili teller, elektrotlar, plastik parçalar ve EKG Kemerine entegre edilen diğer parçalar, satın alma tarihinden itibaren 3 ay veya üretim tarihinden itibaren 6 ay (hangisi daha kısaysa) garanti kapsamındadır. Verilen hiçbir aksesuar garanti kapsamında değildir.

Bu garanti, makul olmayan kullanım, kullanıcı ve bakım talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan arızaları veya yetkisiz veya niteliksiz tamirlerden kaynaklanan hasarları içermez veya kapsamaz.

DİKKAT! Elektrotlar vücutla tam temas halinde değilse kullanmayın.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ζώνη Ηλεκτροδίων ΗΚΓ LevMed AllBrand™



Με λαβές (Αρ. Κατ. 11005/h)



Με ιμάντες (Αρ. Κατ. 11005/s)



Rx Only

Προσοχή: Διαβάστε την πλήρη λίστα οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής ιατρού.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Η ζώνη ηλεκτροδίων ΗΚΓ LevMed AllBrand™ είναι ένα επαναχρησιμοποιήσιμο παρελκόμενο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί με συσκευές ΗΚΓ για βραχυπρόθεσμες καταγραφές ΗΚΓ σε ανάπαυση 12 απαγωγών για ενήλικες και παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΕΣ

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αναφερόμενη προοριζόμενη χρήση.
- Αφαιρέστε τη συσκευή πριν εκτελέσετε απινίδωση.
- Η ζώνη ΗΚΓ LevMed προορίζεται να χρησιμοποιείται για καταγραφές ΗΚΓ σε ανάπαυση, βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι χαλαρός, ξαπλώνει χωρίς να κινείται, σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μείνετε μακριά από συσκευές που δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη ζώνη ECG LevMed σε ερεθισμένο ή κατεστραμμένο δέρμα.

SYMBOL LEGENDS



Προσοχή, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης

SN

Σειριακός αριθμός

REF

Αριθμός καταλόγου



Κατασκευαστής

LOT



Ημερομηνία κατασκευής



Μη αποστειρωμένο



WEEE-Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Ζώνη Ηλεκτροδίων ΗΚΓ LevMed AllBrand™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η Ζώνη Ηλεκτροδίων ΗΚΓ LevMed AllBrand™ είναι ένα σύστημα ηλεκτροδίων ΗΚΓ χυτευμένων σε ιδιαίτερα εύκαμπτη σιλικόνη που είναι παρόμοια με τα προκαρδιακά ηλεκτρόδια ECG V1-V6. Η Ζώνη είναι εύκαμπτη και μπορεί να τεντωθεί για να ταιριάζει σε όλα τα σχήματα και μεγέθη σώματος, αντρών και γυναικών. Όταν προσαρμόζεται στο στήθος, τεντώνεται στις απαιτούμενες αναλογίες και η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων ρυθμίζεται αυτόματα. Η Ζώνη μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε πρότυπο καλώδιο ΗΚΓ ασθενούς.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σαρώστε τον ανάλογο κωδικό QR για τη διαδικασία εφαρμογής της Ζώνης ΗΚΓ AllBrand™:



Για AllBrand με λαβές (Αρ. Κατ. 11005/h) Για AllBrand με ιμάντες (Αρ. Κατ. 11005/s)

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Σκουπίστε τη ζώνη ECG LevMed με απολυμαντικό μαντηλάκι μετά από κάθε ασθενή. Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικά που προορίζονται για χρήση σε ιατρικές συσκευές.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε απολυμαντικά που περιέχουν αλκοόλη.


ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση της LevMed Ltd. ισχύει για τα εξαρτήματα σιλικόνης της ζώνης ΗΚΓ για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς ή 15 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, όποια λήξει νωρίτερα. Τα καλώδια, τα εσωτερικά σύρματα, τα ηλεκτρόδια, τα πλαστικά μέρη και άλλα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα στη ζώνη ΗΚΓ καλύπτονται από εγγύηση για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς ή 6 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, όποια λήξει νωρίτερα. Η εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν παρεχόμενα παρελκόμενα.

Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει ούτε καλύπτει δυσλειτουργίες που προκαλούνται από αλόγιστη χρήση, μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήστη και συντήρησης ή ζημιές που προκαλούνται από μη ενδεδειγμένες ή μη εξουσιοδοτημένες επισκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην το χρησιμοποιείτε εάν τα ηλεκτρόδια δεν βρίσκονται σε πλήρη επαφή με το σώμα.

تعليمات الاستخدام حزام إلكتروني تخطيط القلب الكهربائي LevMed AllBrand™

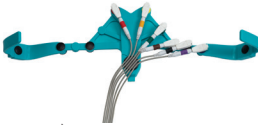

مع مقابض (رقم كاتالوج h/11005)



مع أحزمة (رقم كاتالوج s/11005)

تنبيه: اقرأ قائمة التعليمات كاملة قبل استخدام المنتج



تنبيه: يقصر القانون الفيدرالي الأمريكي بيع هذا الجهاز على الطبيب أو بأمر منه.

Rx Only

الاستخدام المخصص: حزام إلكتروني تخطيط القلب الكهربائي LevMed Allbrand™ عبارة عن ملحق قابل لإعادة الاستخدام مخصص للاستخدام مع أجهزة تخطيط القلب الكهربائي لتسجيلات التخطيط قصير الأمد باستخدام 12 قطبًا أثناء الراحة للبالغين والأطفال.

تحذيرات وتنبيهات

- لا تستخدم هذا الجهاز لأي غرض بخلاف المذكور في الاستخدام المخصص.
- انزع الجهاز قبل القيام بإزالة الرجفان.
- حزام تخطيط القلب الكهربائي LevMed مخصص للاستخدام مع تسجيلات تخطيط القلب الكهربائي أثناء الراحة، لهذا تأكد من أن المريض في حالة استرخاء، وأنه مستلق بنبات على سطح مسطح.
- ابتعد عن الأجهزة التي تصدر حقولاً كهرومغناطيسية قوية.

موانع الاستخدام

- لا تستخدم حزام تخطيط القلب الكهربائي LevMed على جلد متهيج أو متضرر.

مفتاح الرموز



تنبيه، راجع تعليمات الاستخدام



تاريخ التصنيع



الرقم التسلسلي



غير معقم



رقم الكتالوج



WEEE - نفايات معدات كهربائية وإلكترونية



المصنع



حزام إلكتروني تخطيط القلب LevMed AllBrand™

تعليمات الاستخدام 1. وصف الجهاز

حزام تخطيط القلب الكهربائي LevMed AllBrand™ عبارة عن نظام من إلكترونيات تخطيط القلب الكهربائي مصبوبة في سيليكون عالي المرونة تشبه إلكترونيات V1 V6 قرب القلب. الحزام مرن ويمكن شده لملاءمة كل أحجام وقياسات الجسم للرجال والنساء على حد سواء، وعند وضعه على الصدر، فإنه يتمدد إلى القياسات المطلوبة، ويتم ضبط المسافة بين الإلكترونيات تلقائيًا. يمكن وصل الحزام بأي كابل مريض قياس لجهاز تخطيط القلب الكهربائي.

2. تعليمات الوضع

امسح رمز QR ذي الصلة للاطلاع على عملية وضع حزام تخطيط القلب الكهربائي AllBrand™:



لحزام AllBrand مع الأحزمة (رقم كاتالوج s/11005) لحزام AllBrand مع المقابض (رقم كاتالوج h/11005)

3. التنظيف والتطهير

امسح حزام تخطيط القلب الكهربائي LevMed بقطعة مطهرة بعد كل مريض. استخدم فقط المطهرات المخصصة للاستخدام على الأجهزة الطبية. تنبيه: لا تستخدم مطهرات تحتوي على الكحول.

الضمان

ينطبق ضمان LevMed Ltd. على مكونات السيليكون في حزام تخطيط القلب الكهربائي لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء أو لمدة 15 شهرًا من تاريخ الإنتاج، أيهما أقصر. الكابلات، الأسلاك الداخلية، الإلكترونيات، الأجزاء البلاستيكية والقطع الأخرى المدمجة في حزام تخطيط القلب الكهربائي تغطيها ضمانة لمدة 3 شهور من تاريخ الشراء أو لمدة 6 أشهر من تاريخ الإنتاج، أيهما أقصر. لا تنطبق الضمانات على أية ملحقات يتم تزويدها.

لا تشمل هذه الضمانة ولا تغطي الأعطال الناتجة عن الاستخدام غير المنطقي أو غير الممثل لتعليمات المستخدم والصيانة، أو الضرر الناتج عن الإصلاحات غير المصرح بها أو غير المؤهلة.

اهتمام! لا تستخدمه إذا لم تكن الأقطاب الكهربائية على اتصال كامل بالجسم



INSTRUÇÕES DE USO

O Produto: Cinta Eléctrodo ECG, da Empresa, LevMed AllBrand™



Produto com Alças (Categoria nº 11005/h)



Produto com Alças (Categoria nº 11005/s)



Apenas Rx

Cuidado: Leia toda a lista de instruções, antes de começar a usar o produto

Cuidado: a Lei Federal (EUA) restringe os médicos, em termos de médicos que vendem este dispositivo por conta própria ou que este dispositivo seja vendido por um médico

USO PREVISTO DO PRODUTO: O Produto: Cinta Eléctrodo ECG, da Empresa, LevMed AllBrand™ é um acessório reutilizável, que se destina a ser usado em conjunto com dispositivos de ECG para registros de ECG para adultos e crianças que são de curto prazo com 12 variações de repouso.

AVISOS E CUIDADOS

- Não use este dispositivo para quaisquer outros fins, que sejam diferentes dos fins declarados sobre o uso pretendido.
- O dispositivo deve ser removido, antes que o processo de desfibrilação seja realizado.
- A Cinta ECG LevMed destina-se a ser usada para registros de variações de ECG, certificando-se de que o/a paciente esteja relaxado/a, deitado/a sem se mover e deitado em uma superfície plana.
- Mantenha uma distância segura de dispositivos que geram campos eletromagnéticos fortes.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não use a Cinta ECG da LevMed na superfície do/a pele do/a paciente que esteja irritada ou danificada.

SYMBOL LEGENDS



Cuidado, consulte as instruções sobre como usar o produto



Número de série



Número de catálogo



Detalhes do fabricante



Data de fabricação do produto



O produto não é estéril



REEE- Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos



O Produto: Cinta Eléctrodo ECG, da Empresa, LevMed AllBrand™

INSTRUÇÕES DE USO

1. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O Produto: Cinta Eléctrodo ECG, da Empresa LevMed AllBrand TM é composto por um sistema de eletrodos de ECG, que são fundidos em silicone hiperflexível semelhante aos eletrodos pré-cordiais de ECG V1-V6. A Cinta é flexível e pode ser esticada para caber em todas as formas e tamanhos de corpo, tanto para homens quanto para mulheres; quando o Produto: A Cinta Eléctrodo ECG, da Empresa LevMed AllBrand TM é encaixada na região peitoral do paciente, ela consegue se esticar para se adequar às proporções desejadas do paciente, e a distância entre os eletrodos é configurada automaticamente. A Cinta pode ser conectada a qualquer padrão de cabo para pacientes de ECG.

2. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Escaneie o código QR aplicável para o processo de Aplicação do Produto: Cinta Eléctrodo ECG, da Empresa, LevMed AllBrand™:

Para a versão AllBrand que possui Cabos (Categoria # 11005/h)



Para a versão AllBrand que possui Cintas (Categoria # 11005/s)

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Limpe a Cinta ECG da LevMed com uma solução de limpeza desinfetante, para prepará-la, após cada paciente tê-lo usada. Use apenas soluções de limpeza desinfetantes que sejam especificamente dedicadas ao uso em tais dispositivos médicos.

Cuidado: Não use soluções de limpeza desinfetantes que contenham álcool como ingrediente.

GARANTIA


A garantia da Empresa, LevMed Lda., é válida apenas para os componentes de silicone da Cinta ECG e a referida garantia tem um período de validade de 12 meses a contar da data de compra do produto ou em alternativa 15 meses a contar da data de fabricação do produto, prevalecendo o prazo de validade menor. Cabos, fios internos, eletrodos, peças plásticas e outras peças integradas à Cinta ECG são cobertos por garantia por um período de 3 meses a contar da data da compra ou 6 meses no país a partir da data de produção, o prazo de validade é o tempo mais curto. A cobertura da garantia não se aplica a nenhum dos acessórios fornecidos. Esta garantia não inclui ou cobre o seguinte: mau funcionamento causado pelo uso inadequado por parte do usuário.

ATENÇÃO! Não use se os eletrodos não estiverem em contato total com o corpo.



NÁVOD K POUŽITÍ

LevMed AllBrand™ EKG elektrodový pás

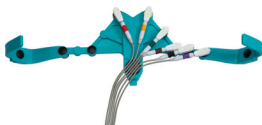

s držadly (Cat# 11005/h)



s upínáním (Cat# 11005/s)



Rx Only

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití

Upozornění: Dle federálního zákona smí být tento přístroj prodáván pouze na pokyn nebo objednávku lékaře

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: LevMed Allbrand™ EKG elektrodový pás je opakovaně použitelné zařízení, které je určeno k použití spolu s EKG přístroji pro krátkodobé, 12 svodové, klidové EKG záznamy u dětí i dospělých.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Před zahájením defibrilace přístroj sundejte.
- Pás LevMed EKG je určen k záznamu klidového EKG, ujistěte se, že je pacient uvolněný a leží v klidu na rovném povrchu.
- Nepřibližujte se k zařízením, která vytvářejí silná elektromagnetická pole.

KONTRAINDIKACE

- Nepoužívejte LevMed EKG pás na podrážděnou nebo poraněnou pokožku.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Upozornění



Výrobní číslo



Katagolové číslo



Výrobce



Datum výroby



Nesterilní



Elektronické zařízení: Náležitě zlikvidujte



LevMed AllBrand™ EKG elektrodový pás

NÁVOD K POUŽITÍ

1. POPIS ZAŘÍZENÍ

LevMed AllBrand™ EKG pás je systém EKG elektrod uložených v hyperflexibilním silikonu, který je podobný hrudním (prekordiálním) EKG elektrodám V1-V6. Pás je flexibilní a lze jej natáhnout tak, aby se přizpůsobil všem tvarům a velikostem těla, jak mužským tak ženským; po nasazení na hrudník se natáhne do požadovaných rozměrů a vzdálenost mezi elektrodami se nastaví automaticky. Pás lze připojit k jakémukoli standardnímu patientskému EKG kabelu.

2. NÁVOD K OBSLUZE

Naskenujte příslušný QR kód pro získání instrukcí k zapojení pásu AllBrand™ EKG.



Pro AllBrand s držadly (Cat# 11005/h) Pro AllBrand s upínáním (Cat# 11005/sn)

3. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

LevMed EKG pás otřete dezinfekčním ubrouskem po každém pacientovi. Používejte pouze dezinfekční přípravky, které jsou určeny k použití na zdravotnické přístroje.

Upozornění: Nepoužívejte dezinfekční prostředky obsahující alkohol.

ZÁRUKA

Záruka společnosti LevMed Ltd. se vztahuje na silikonové součásti EKG pásu po dobu 12 měsíců od data zakoupení nebo 15 měsíců od data výroby, podle toho, která z výše uvedených okolností nastane dříve. Na kabely, vnitřní vodiče, elektrody, plastové díly a další díly integrované do EKG pásu se vztahuje záruka po dobu 3 měsíců od data zakoupení nebo 6 měsíců od data výroby, podle toho, která z výše uvedených okolností nastane dříve. Záruka se nevztahuje na žádná příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nepřiměřeným používáním, nedodržováním pokynů nebo poškození způsobené neoprávněnými nebo nekvalifikovanými opravami.

POZORNOST! Nepoužívejte, pokud elektrody nejsou v plném kontaktu s tělem.



LevMed AllBrand™ EKG elektródový pás



s držiakmi (Cat# 11005/h)



s pásmi (Cat# 11005/s)



Rx Only

Upozornenie: Pred použitím výrobku si prečítajte návod na použitie.

Upozornenie: Podľa federálneho zákona smie byť tento prístroj predávaný iba na pokyn alebo objednávku lekára.

ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE: LevMed AllBrand™ EKG elektródový pás je opakovane použiteľné zariadenie, ktoré je určené k použitiu s EKG prístrojmi pre krátkodobé, 12 zvodové, pokojové EKG záznamy u detí i dospelých.

VAROVANIE A UPOZORNENIE

- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na aké je určený.
- Pred zahájením defibrilácie prístroj zložte.
- Pás LevMed EKG je určený na záznam pokojného EKG, uistite sa, že je pacient uvoľnený a leží v pokoji na rovnom povrchu.
- Nepribližujte sa k zariadeniam, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte LevMed EKG pás na podráždenú alebo poranenú pokožku.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Upozornenie		Dátum výroby
	Výrobné číslo		Nesterilné
	Katalógové číslo		Elektronické zariadení: Náležite zlikvidujte
	Výrobca		Neobsahuje latex
	Šarža		Označenie zhody EU

LevMed AllBrand™ EKG elektródový pás

NÁVOD NA POUŽITIE

1. POPIS ZARIADENIA

LevMed AllBrand™ EKG pás je systém EKG elektród uložených v hyperflexibilnom silikóne, ktorý je podobný hrudným (prekordiálnym) EKG elektródam V1-V6. Pás je flexibilný a je možné ho natiahnuť tak, aby sa prispôbil všetkým tvarom a veľkostiam tela, ako mužským tak ženským; po nasadení na hrudník sa natiahne do požadovaných rozmerov a vzdialenosť medzi elektródami sa nastaví automaticky. Pás je možné pripojiť k akémukoľvek štandardnému patientskemu EKG káblu.

2. NÁVOD NA OBSLUHU

Naskenujte príslušný QR kód pre získanie inštrukcií na zapojenie pásu AllBrand™ EKG.



Pre AllBrand s držiakmi (Cat# 11005/h) Pre AllBrand s pásmi (Cat# 11005/sn)


3. ČISTENIE A DEZINFEKCIA



LevMed EKG pás utrite dezinfekčným obrúskom po každom pacientovi. Používajte iba dezinfekčné prostriedky, ktoré sú určené na použitie na zdravotníckych pomôckach. Upozornenie: Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky obsahujúce alkohol.

ZÁRUKA

Záruka spoločnosti LevMed Ltd. sa vzťahuje na silikónové súčasti EKG pásu po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia alebo 15 mesiacov od dátumu výroby, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených okolností nastane skôr. Na káble, vnútorné vodiče, elektródy, plastové diely a ďalšie diely integrované do EKG pásu sa vzťahuje záruka po dobu 3 mesiacov od dátumu zakúpenia alebo 6 mesiacov od dátumu výroby, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených okolností nastane skôr. Záruka sa nevzťahuje na žiadne príslušenstvo. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené neprimeraným používaním, nedodržiavaním pokynov alebo poškodenia spôsobené neoprávnenými alebo nekvalifikovanými opravami.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte, pokiaľ nie sú elektródy plne v kontakte s telom.

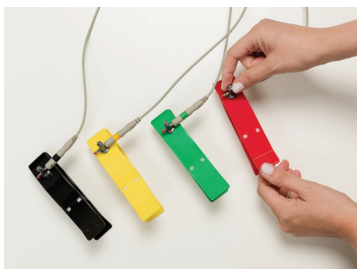

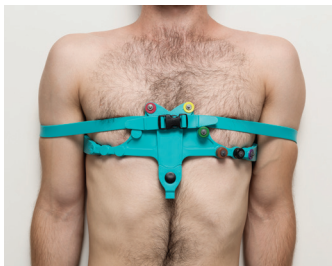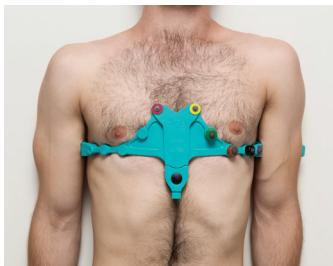



Manufacturer:

LevMed Ltd.
Hanarkis 9/3
Zikhron Ya'akov
3093320
Israel
SRN : IL-MF-000008545
info@levmed.net



**European Authorized
Representative:**

Kinesis Medical B.V.
Nies van der Schansstraat 9
5161 CE Sprang-Capelle
The Netherlands
+31853034974
SRN: NL-AR-000000432
info@kinesismedical.com

Basic UDI-DI 7290016423ECGBALBhF3 ref 11005/h
Basic UDI-DI 7290016423ECGBALBsFR ref 11005/s